

BINDER PURE AQUA SERVICE Wasseraufbereitungssystem



BINDER PURE AQUA SERVICE

KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBWF, MKF, MKFT

Das Wasseraufbereitungssystem BINDER PURE AQUA SERVICE dient zur Aufbereitung von Leitungswasser. Es wird eine Wasserqualität erzeugt, die zum Betrieb von BINDER Klimaschränken geeignet ist. Das Wasseraufbereitungssystem BINDER PURE AQUA SERVICE besteht aus einer wiederverwendbaren Messeinrichtung zur Beurteilung der Wasserqualität, einer auswechselbaren Kartusche zur Wasseraufbereitung sowie den notwendigen Anschlussstücken.

VORTEILE:

- Unabhängig von der Wasserqualität einsetzbar
- Ein Harzwechsel ist nicht nötig, die Kartusche wird bei Erschöpfung ausgetauscht
- Das stoßsichere System ist mobil und leicht zu transportieren
- Dauerhafte Anzeige des aktuellen Betriebszustandes des BINDER PURE AQUA SERVICE

TECHNISCHE DATEN

Wassereingangstemperatur	5-40°C
Maximale Durchflussmenge (max.)	5 l/min
Versorgungsdruck:	1 bis 10 bar
Frischwassertemperatur:	+5 °C ...40 °C
Zulässige Inhaltsstoffe:	
max. zulässiger Gehalt an Chlor:	0,3 mg/l.


TECHNISCHE DATEN NETZADAPTER

Input	100 VAC bis 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz
Output	12 VDC, 500 mA
Schutzart	IP 65 (staubdicht und dicht gegen Wasserstrahl).

LIEFERUMFANG:

Das Wasseraufbereitungssystem BINDER PURE AQUA SERVICE (Art. Nr. 8012-1809) besteht aus:

- Einwegkartusche PURE AQUA 300
- Montageanleitung
- Wasserschlauch, 3 m (Metallschlauch mit R3/4" Anschluss) (OUT)
- Netzadapter, Schlauch für Ablasshahn, Ablasshahn, Leitfähigkeits-Messgerät, Dichtungen

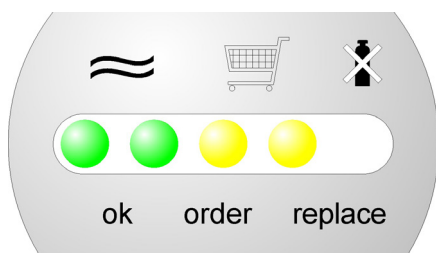

Leitfähigkeits-Messgerät mit Füllstandanzeige

BINDER PURE AQUA SERVICE KOMPLETTSET

Höhe 385 mm, Ø 189 mm inkl.
Einwegkartusche PURE AQUA 300
Art.-Nr. 8012-1809

EINWEG-WECHSELKARTUSCHE PURE AQUA 300

Höhe 385 mm, Ø 189 mm
Einwegkartusche PURE AQUA 300
Art.-Nr. 6011-0179

EINWEG-WECHSELKARTUSCHE PURE AQUA 600

Höhe 665 mm, Ø 189 mm
Einwegkartusche PURE AQUA 600
Art.-Nr. 6011-0180

► Alle Extras online go2binder.com/de-Optionen