



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Sartorius® Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart

298,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

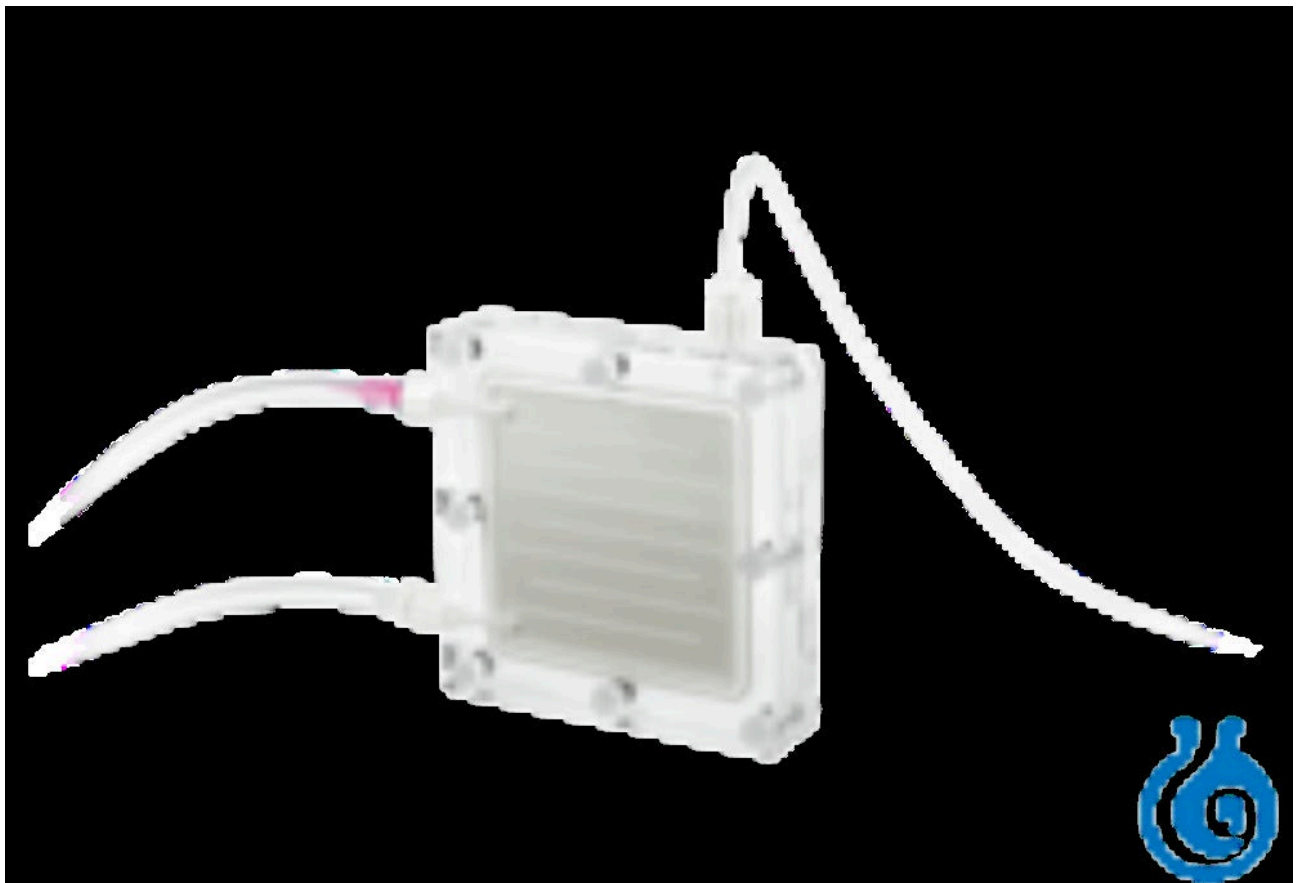

Beschreibung

Die Vivaflow® 50R ist sowohl ideal geeignet für die Konzentrierung von Zellkulturüberständen, als auch für Virus- und Gewässerproben-Konzentration (z.B. für Umweltproben, oder Wasserproben bei der Fischzucht). Dieses ökonomische Produkt ist überaus anwenderfreundlich in der Handhabung, unübertroffen in der Zuverlässigkeit und Flexibilität, und bietet daher was kein anderes im Markt befindliches Labor Filtrationssystem in diesem Maßstab leisten kann. Durch die Rezirkulation der Probe durch die engen meanderartigen Kanäle der Module werden hohe Crossflow-Geschwindigkeiten mit einem Minimum an erforderlicher Pumpenleistung erreicht. Eine einzige 50 cm² Crossflow-Kassette ermöglicht typischerweise die Aufkonzentrierung von 250 ml um den Faktor 20 in weniger als 30 min. Alternativ können zwei Vivaflow® 50R Einheiten parallel zusammengeschaltet werden um die Konzentration von einem Liter in etwa 45 min. zu erreichen. Eine höchstmögliche Produktausbeute wird bereits durch einmaliges Spülen der Kassette erzielt. Die Vivaflow® 50R ist einfach zu reinigen und kann mehrfach wiederverwendet werden. Das erforderliche Zubehör für die Proben-Konzentrierung mit einer einzelnen Kassette, mit Ausnahme der Peristaltikpumpe und dem Pumpenkopf der Größe 16, ist im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe des zusätzlich verfügbaren Diafiltrationsbechers kann das System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch genutzt werden. Gebrauchsfertige Crossflow-Einheit für den Laboreinsatz Schnelle und einfache Aufkonzentration von Proteinproben Wiederverwendbar Einsetzbar für den Volumenbereich von 0,1 l – 1 l Ideal geeignet für die Aufkonzentrierung von Zellkultur-Überständen und auch Virus-haltigen Lösungen Kleinste Crossflow-Kassette am Markt mit der premium Hydrosart® Membran Hohe Flussrate und Wiederfindung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-2531
Hersteller (Marke)	Sartorius
Transporttemperatur	Raumtemperatur

