




Bandelin SD 06, GLASBECHER KPL.

Artikelbilder

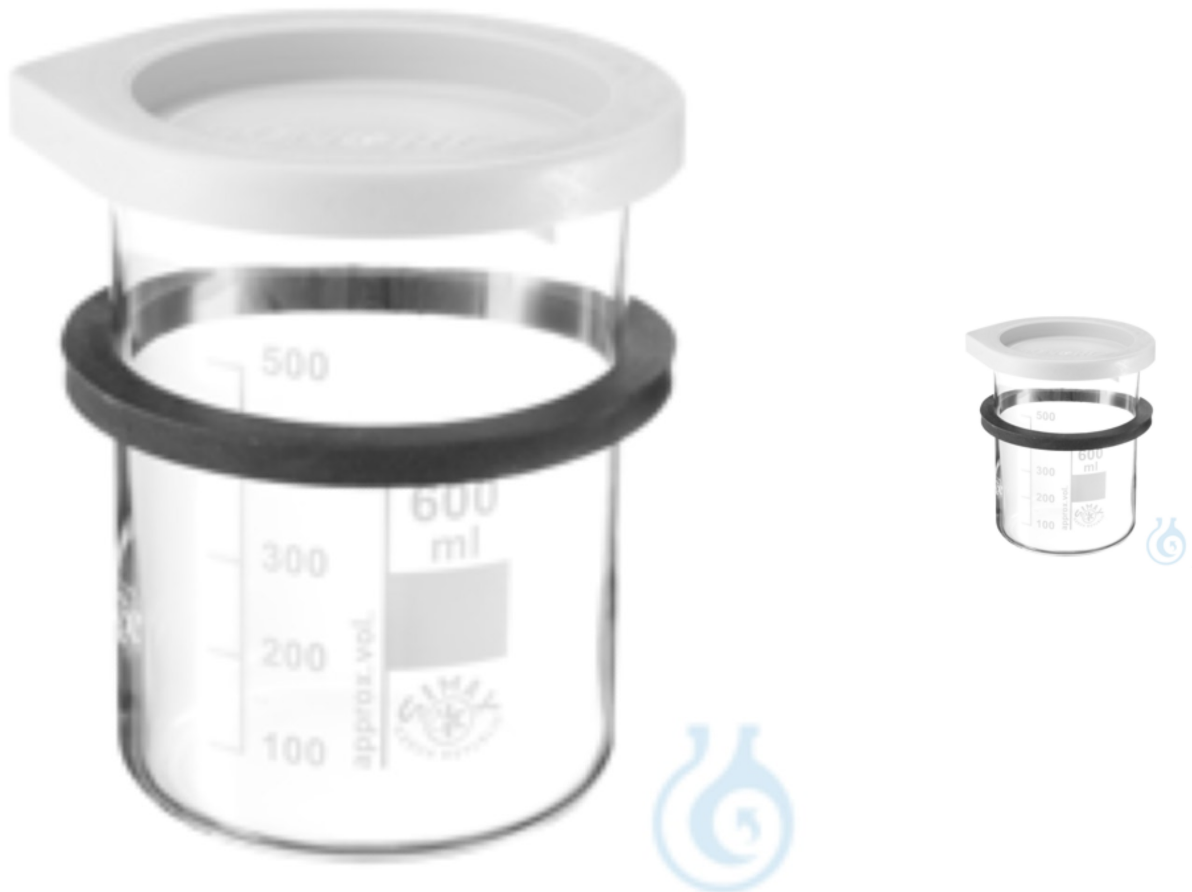

Beschreibung

Glas, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen mit Ring GR 06 und Deckel DD 06. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0193
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960736101
EAN	4058072505387
Ursprungsland	Tschechien
Volumen	600 ml
Verpackungsbreite	0.11000 m
Verpackungshöhe	0.18000 m
Verpackungstiefe	0.09000 m
Verpackungsvolumen	0.00119700 ccm
Breite	90 mm
Zolltarifnummer	70200080
Höhe	125 mm
Länge	90 mm

