




labtable
Lab Furniture & Concepts



Laboreinrichtung

Hochwertiges Material und anspruchsvolles Design
Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe

 +49 (0)6221 / 8442-44

 <https://www.neolab.de/labtable>



labtable
Lab Furniture & Concepts

Planung



Unsere Spezialisten erstellen mit Ihnen einen ersten Plan nach Ihren Wünschen. Dazu bieten wir Ihnen an, Sie vom ersten Gedanken bis hin zur funktionalen Umsetzung zu begleiten. Hierbei wird das neue Labor vermessen und eine erste 3D-Ansicht von Ihrem Labor erstellt.

Als ergänzendes Round-Up zu Ihrem geplanten neuen Labor übernehmen wir auch den Abbau und fachgerechte Entsorgung Ihrer alten Möbel.

☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>



labtable
Lab Furniture & Concepts

Sonderlösungen



Wir bieten Ihnen Sonderlösungen für Ihren optimierten Laborprozess an, ganz gleich ob es sich um einen Magnetrührertisch, Sondertisch mit 2 Boards und Stativaufbau oder ganz individuelle Lösungen nach Ihren Wünschen handelt.

☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>



labtable
Lab Furniture & Concepts

System



Zahlreiche verschiedene Möglichkeiten von der Ausstattung bis zur Farbe stehen Ihnen bei der Möbelauswahl zur Verfügung. Labormöbel von der Stange kann jeder. Mit labtable Labormöbeln wird Ihr Labor individuell und bunt.


labtable produziert Labormöbel in einer breiten Palette von sowohl Größen- als auch Formvarianten – genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Die labtable Labormöbel werden aus qualitativ hochwertigen laminierten Spanplatten hergestellt. Unsere Labormöbel werden mit fugenlosen Kanten produziert, wodurch eine gute Wasserbeständigkeit und langfristige Lebensdauer von unseren Labormöbeln garantiert wird.

Als Standard sind Unterbaumöbel aus hygienischen Gründen immer auf Rollen. Auf Wunsch können diese auch auf Sockel angeboten werden. Die Medien Zeilen sind aus massivem Aluminium mit Epoxidbeschichtung hergestellt, ebenso die Unterbauten, egal ob als C- oder H- Form.


☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>

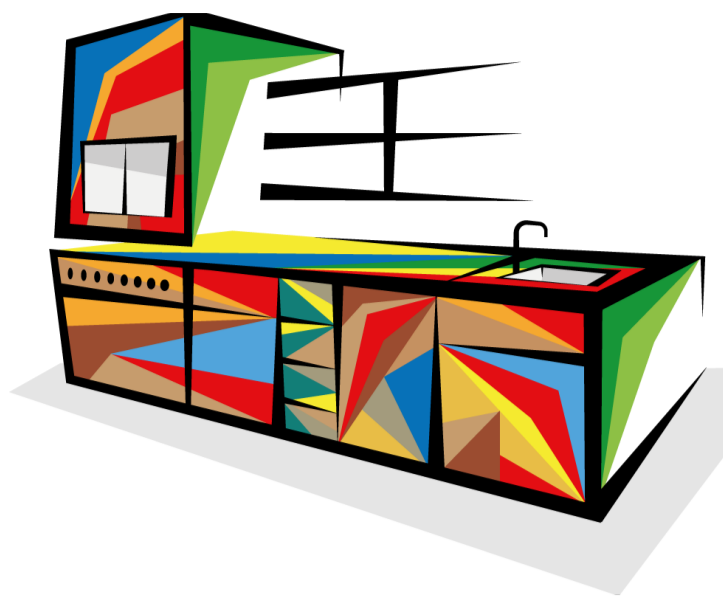

labtable
Lab Furniture & Concepts

Arbeitsplatten

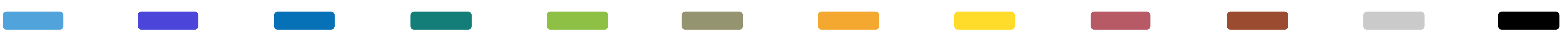


labtable kennt Ihre Bedürfnisse im Laboralltag. Basierend auf dieser Kenntnis wählen wir für Sie die passenden Arbeitsplatten mit der erforderlichen thermischen, chemischen und mechanischen Beständigkeit aus. Wir bieten Arbeitsplatten mit Wulstrand, integriertem Becken oder antibakterieller Oberfläche an. Folgende Materialien stehen Ihnen zur Verfügung:



HPL




Steinplatten




Melamin



Edelstahl

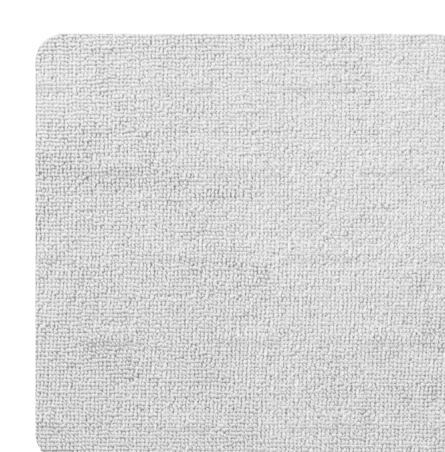

Polypropylen

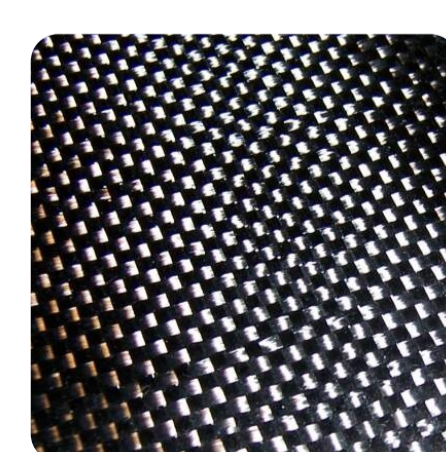


Verbundmaterialien

Das Gleiche gilt für die Spülbecken, auch hier sind die Ausführungen in PP, Edelstahl und Steinzeug lieferbar. Dabei bleiben auch keine Wünsche bezüglich der Größe offen.

☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>

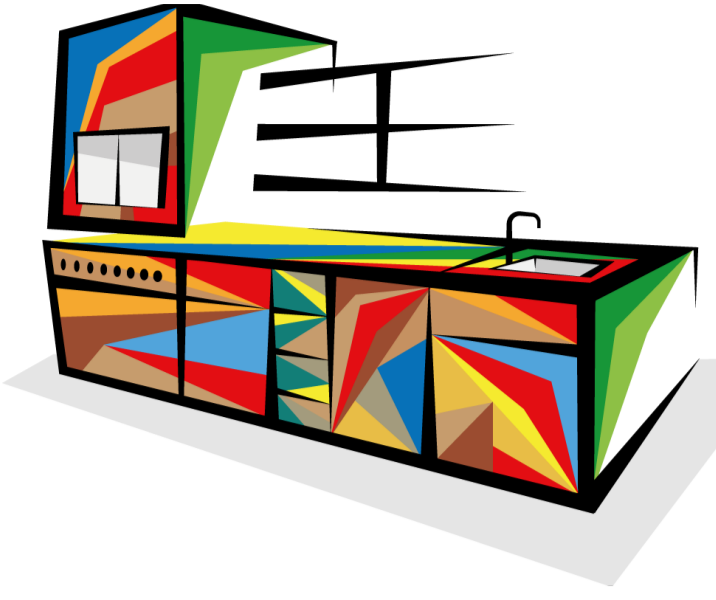

labtable
Lab Furniture & Concepts

Sicherheitstechnik



Wir liefern von der Gefahrenstofflagerung bis zum komplexen Lösungsmittelentsorgungssystem die gesamte Infrastruktur.

Wählen Sie gleich bei der Einrichtung den passenden Sicherheitsschrank für Ihre Lösungsmittel und Chemikalien mit aus. Wir arbeiten mit unseren Partnerfirmen LSS, Asecos und Düperthal zusammen.



☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>



labtable
Lab Furniture & Concepts

Medienzeile



Ausstattungsoptionen

Elektroinstallation:
Hauptschalter,
Notschalter und
Steckdosen

Montagevorrichtungen für
Geräte

LED-Beleuchtung

Wasseranschlüsse,
Gasanschlüsse

Druckluftanschlüsse

Lokale Absaugung

Ventile




Über die Medienzeilen von labtable erfolgt die Verteilung sowohl flüssiger als auch gasförmiger Medien, einschließlich Elektroinstallationen. Der Schwerpunkt liegt auf der Benutzerfreundlichkeit, der Bedienelemente und der guten Zugänglichkeit der Anschlüsselemente.

Wir bieten die Medienzeilen in einer Reihe von Typen und Größen an. Das modular aufgebaute flexible Kassettensystem erlaubt eine nachträgliche Konfigurationsänderung. Die Medienleitungen in den Medienzellen sind für die Reparaturen und Revisionen ohne notwendige Demontage zugänglich. Die Medienzellen können wahlweise auf dem Boden, auf dem Labortisch oder frei an der Decke hängend installiert werden.

Viele Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen bei der Ausstattung der Medienzeile zur Verfügung. Sie können mit unserem I-panel System auch jederzeit Umbauten und Nachrüstungen vornehmen.

☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>

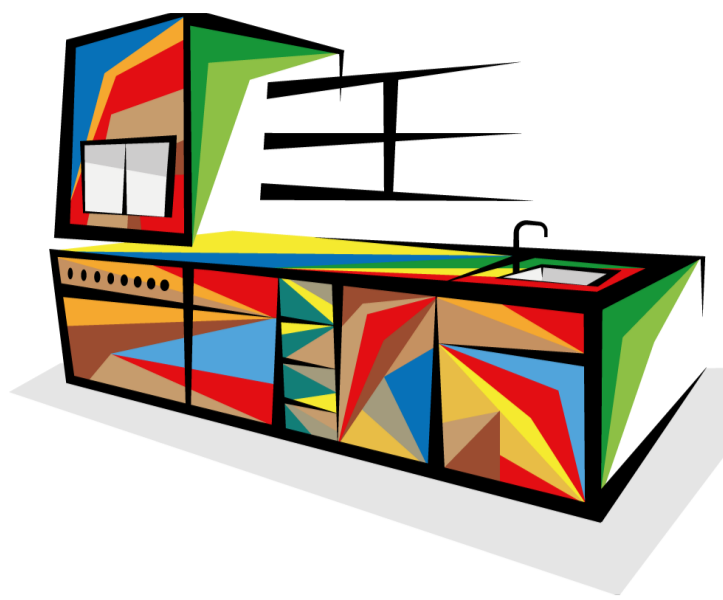

labtable
Lab Furniture & Concepts

Digestorien



Zubehör

Sicherheitsschränke

Gerätehalter oder Schublade

Gitter für Apparaturen

Luftfilteranlage


Auffangwannen für Abfälle

Durchführungen für Kabel oder
für Medien



labtable bietet Ihnen für Ihre Anwendung das passende Digestorium. Die Auswahl erstreckt sich von einfachen benutzerfreundlichen Digestorien bis hin zu Digestorien mit elektrisch gesteuerten Frontscheiben und einer Regelungseinheit, die dynamisch die Mengen der zugeführten und der abgesaugten Luft, in der Abhängigkeit von der Bewegung oder von der aktuellen Position der Frontscheibe regelt.


Die Digestorien entsprechen der Norm EN14174, sie sind CE-zertifiziert und können auf Wunsch nach der Norm ATEX 94/9/EC modifiziert werden.

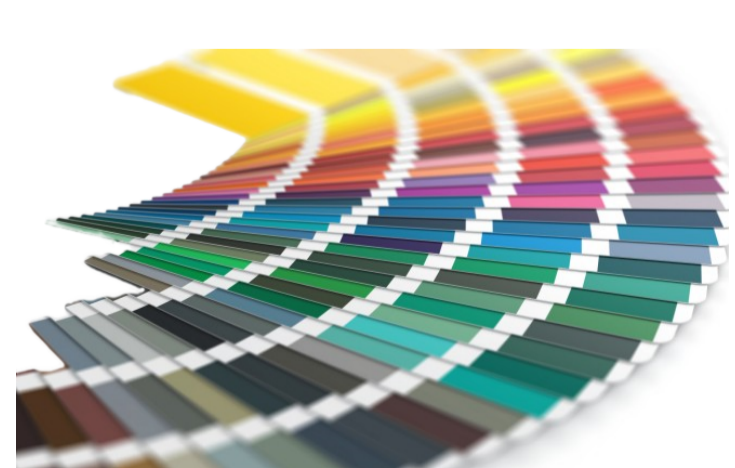

Mit labtable Labormöbeln wird Ihr Labor individuell und bunt.

☎ +49 (0)6221 / 8442-44

🏠 <https://www.neolab.de/labtable>

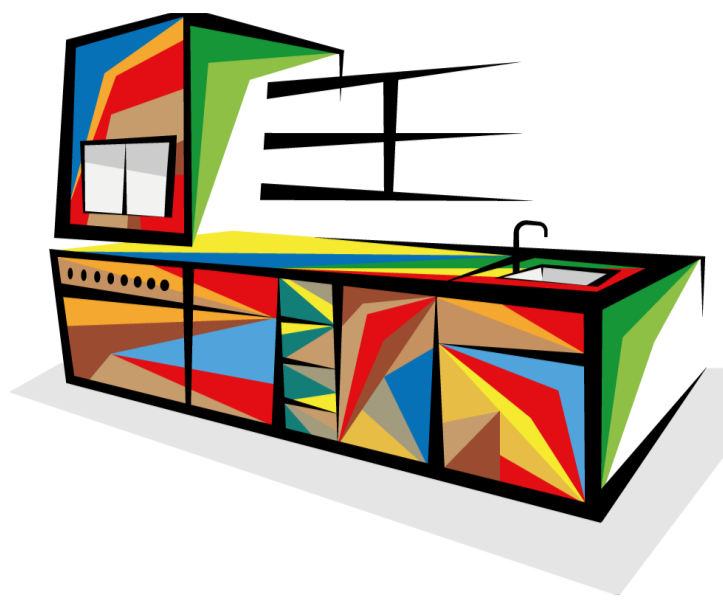

labtable
Lab Furniture & Concepts

Kontakt



Ihr Ansprechpartner für labtable:



Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg

☎ +49 (0)6221 / 8442-44
📠 +49 (0)6221 / 8442-33
✉ info@neolab.de
🏠 <https://www.neolab.de/labtable>